

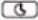


ZENO™

Guía rápida de uso

- 1 Asegúrese de que la batería está completamente cargada.
- 2 Limpie el filtro.
- 3 Pulse .
- 4 Pulse  cuando se encienda la luz verde.
- 5 Póngalo sobre la espinilla.
- 6 Esté atento al tono indicador de tiempo cada 30 segundos.
- 7 Retírelo después del tono indicador del final del tratamiento (2 ½ minutos , la luz se vuelve ámbar).

Para tratar espinillas adicionales repetir los pasos del 4 al 7.

Si fuera necesario, repetir el tratamiento después de 4-12 horas.

Vida del filtro

- ● ● ● de 68 a 90 tratamientos
- ● ● ○ de 46 a 67 tratamientos
- ● ○ ○ 23 a 45 tratamientos
- ○ ○ ○ menos de 23 tratamientos
- ☀ ○ ○ ○ 5 ó menos tratamientos
- ☀ ☀ ☀ ☀ Reemplace el cartucho

Carga de la Batería

- Batería completa
- ☀ Menos de media carga
- Recargar

Lea el manual del producto

Para reducir el riesgo de padecer una descarga eléctrica o el deterioro del producto, mantenga su Zeno y el cargador lejos del agua.

NO PONGA su Zeno o su cargador donde pueda caerse o ser arrojado al agua o cerca de superficies calientes.

NO USE Zeno si el botón de activación del tratamiento está iluminado de color ámbar.

NO USE Zeno hasta que el color del botón de activación de tratamiento sea verde.

NO RETIRE Zeno si está enchufado y se le cae al agua.

DESENCHÚFELO antes de sacarlo del agua.

NO UTILICE Zeno mientras se bañe, esté en el agua, o tenga agua en los ojos y/o labios.

NO TIRE del cargador cuando este enchufado, o lo use si el cable o el cargador está dañado, o si no funciona correctamente.

ÉSTE ATENTO si hay niños alrededor mientras utiliza Zeno.

USE ZENO solo para lo que está descrito en el manual del producto y solo utilice el cartucho de recambio Zeno.

Si experimenta cualquier disconformidad usando Zeno, abandone el tratamiento y consulte a su dermatólogo.

Si no cumple con las advertencias puede ocasionar serios daños o incluso un fuerte shock eléctrico.

Fabricado por Tyrell, Inc. Houston TX 77067

Llama al 902 10 33 53

www.zenoberica.com Label no. 01, D6/05